



ГарантСтер

Информационная система для
ЦСО

Руководство Администратора

Оглавление

Информационные справочники.....	3
Справочник «Упаковка».....	3
Справочник «Изделия».....	4
Формирование наборов.....	5
Справочник «Подразделения».....	6
Отчеты.....	8
Документы.....	11
Сведения о продуктах.....	12


Информационные справочники

Справочник «Упаковка»

Одним из первых справочников, который необходимо заполнить является справочник «Упаковка».

В нем указываются тип и размеры упаковочного материала, который используется в ЦСО.

Для работы с данным справочником необходимо перейти во вкладку «Базы данных» и выбрать «Упаковка»

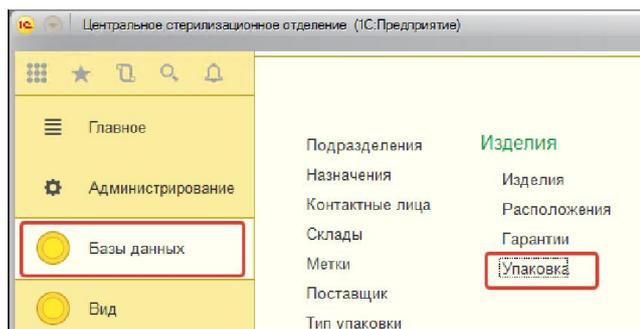

В появившемся окне нажмите «Создать». Откроется новое окно «Упаковка (создание)»

В нем необходимо заполнить основные поля:

Размер, Характеристика, Срок годности (года), Срок сохранения стерильности (дни)

Например:

Размер: 75мм x 300мм

Характеристика: Комбинированный пакет без складки

Срок годности (года): 5

Срок хранения стерильности (дни): 365

Для завершения редактирования нажмите «Записать и закрыть»

75мм x 300мм (Упаковка) (ЦС:Предприятие)

75мм x 300мм (Упаковка)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

Размер: 75мм x 300мм

Тип упаковки: ▾ ...

Характеристика:

Комбинированный пакет без складки

Срок годности (года): 5

Срок сохранения стерильности (дни): 365

Справочник «Изделия»

После того как справочник «Упаковка» будет наполнен данными, необходимо наполнить справочник Изделия.

Для того чтобы начать работу с данным справочником необходимо перейти во вкладку «Базы данных» и выбрать «Изделия»

Для создания новой карточки изделия нажмите «Создать» в новом окне заполните основные поля

Наименование: название изделия

Тип:

единичная упаковка-указывается для единичных изделий

лоток указывается для наборов

Упаковочный материал: основной вид упаковки

Альтернативный (если необходимо): упаковка, используемая, в случае если основная закончилась

Печать этикетки (если необходимо): этикетка используется для маркировки изделий в зоне упаковки

Печать упаковочного листа (если необходимо): лист содержит весь перечень изделий входящих в набор. Печатается на этапе упаковки.

Группа программ мойки: способ обработки в моечной машине

Уже упаковано: если изделие не требует мойки и поступает в ЦСО уже упакованным укажите это

Группа программ стерилизации: способ обработки в стерилизаторе.

По завершению нажмите «Записать и закрыть»

Зажим Бильрот типа москит (Изделия)

Основное [Прикрепление номенклатуры](#) [Присоединенные файлы](#)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Тип:

Статус изделия:

Изображение изделия

Файл картинки: ...

Регламент обработки **Свойства** [Дополнительные поля](#) [Замечания](#)

Упаковка

Упаковочный материал: Альтернативный:

Время сборки / упаковки (сек.): Количество в упаковке:

Печать этикетки: Печать упаковочного листа:

Обработка

Группа программ мойки:

Уже упаковано:

Группа программ стерилизации:


Формирование наборов

Наборы формируются так же в справочнике «Изделия» задействуя ранее введенные единичные изделия.

Для формирования набора необходимо сделать следующее:

Все поля заполняются аналогично единичным изделиям, за исключение типа. Для того чтобы сформировать состав набора выберите **Тип: Лоток**. Появится вкладка «**Состав**»

В данной вкладке добавьте единичные изделия, входящие в состав набора и их количество.

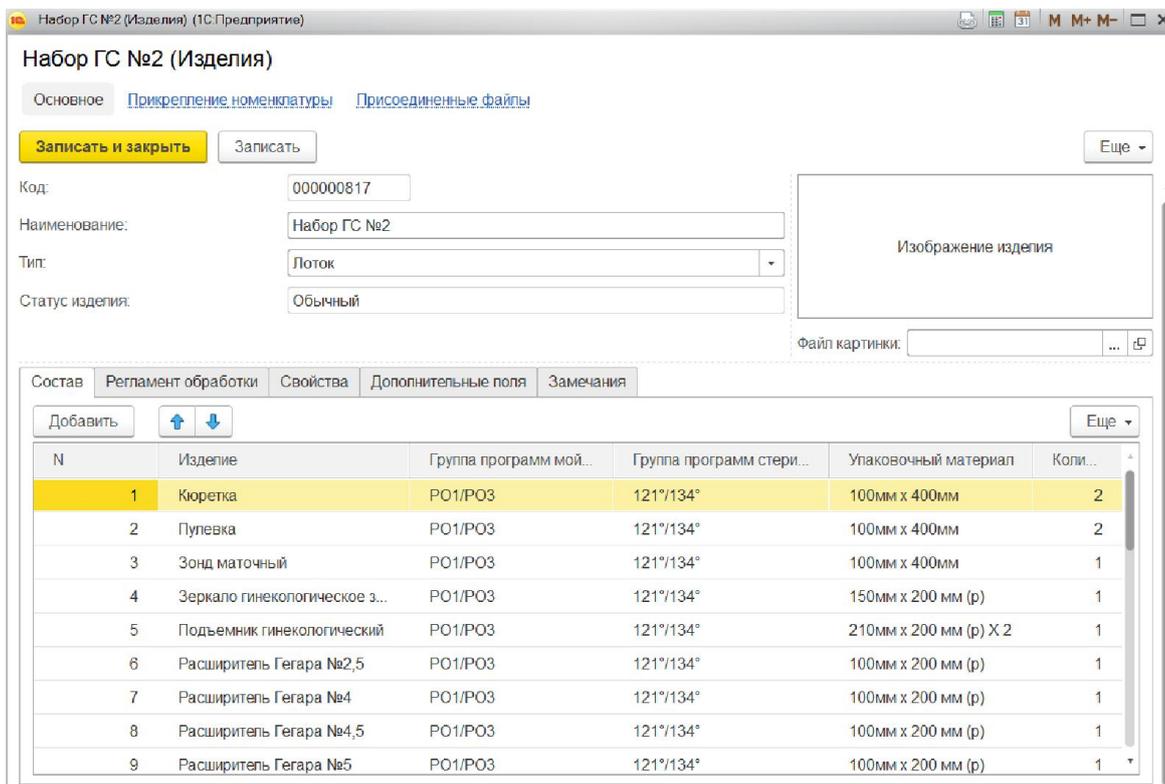


Справочник «Подразделения»

Перейдите во вкладку База данных – Подразделения. Нажмите кнопку **«Создать»** и заполните основные поля.

Наименование: полное наименование подразделения

Короткое наименование: краткое наименование для подразделения принятое в больнице.


Нажмите клавишу **«Записать»**

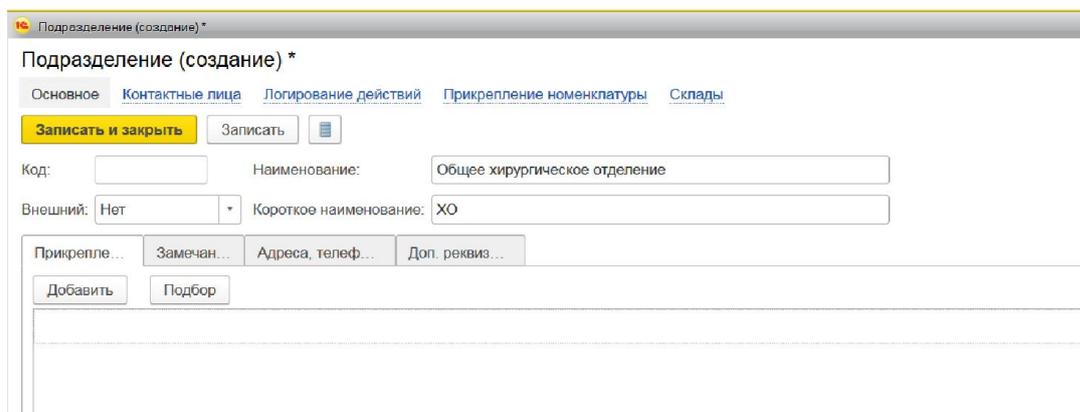

Далее следует сформировать список инструментов, которые потенциально могут поступить на обработку от данного подразделения. На основании данного списка в последующем появится возможность печати шаблона требования для подразделения.

Не закрывая окно вновь созданного подразделения во вкладке **«Прикрепления»** через клавишу **«Подбор»** добавить необходимые изделия в список.

По завершению наполнения списка закройте окно **«Изделия»** и в основном окне нажмите **«Записать и закрыть»**

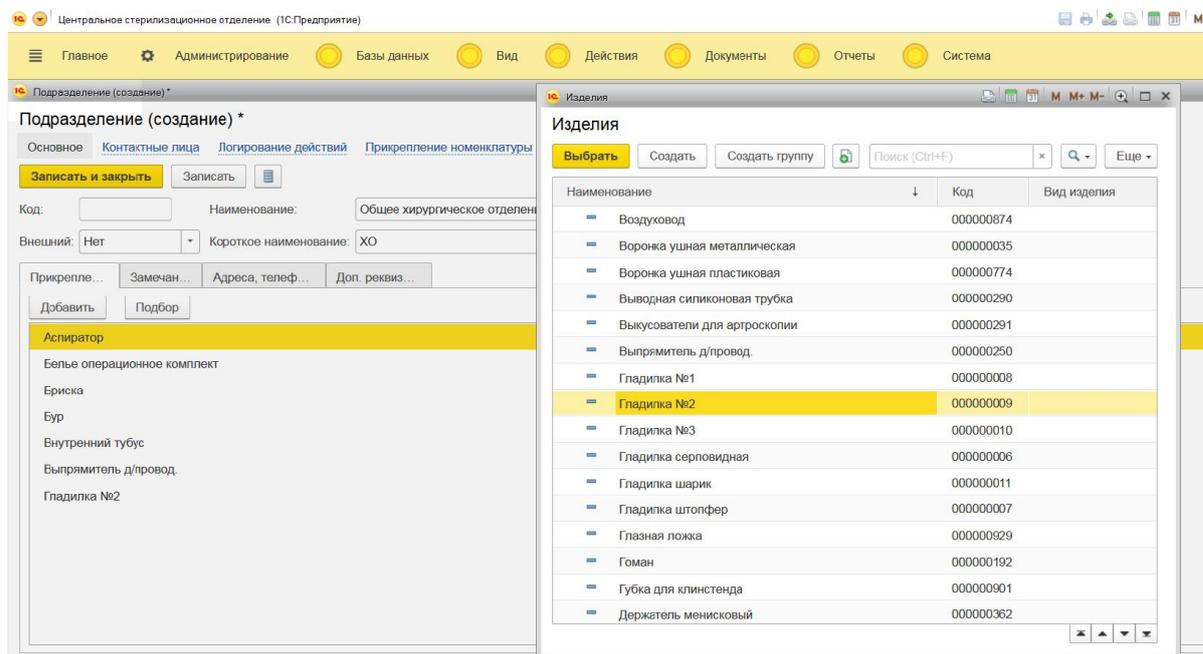


Шаблон подразделения

Для взаимодействия подразделений и ЦСО необходимо использовать шаблон подразделения, в котором отображен весь список потенциально возможных изделий поступаемых в ЦСО на обработку.

Для каждого подразделения должен быть сформирован свой список (см. наполнение справочника Подразделения)

Для печати шаблона перейдите во вкладку действия – Шаблон подразделения.

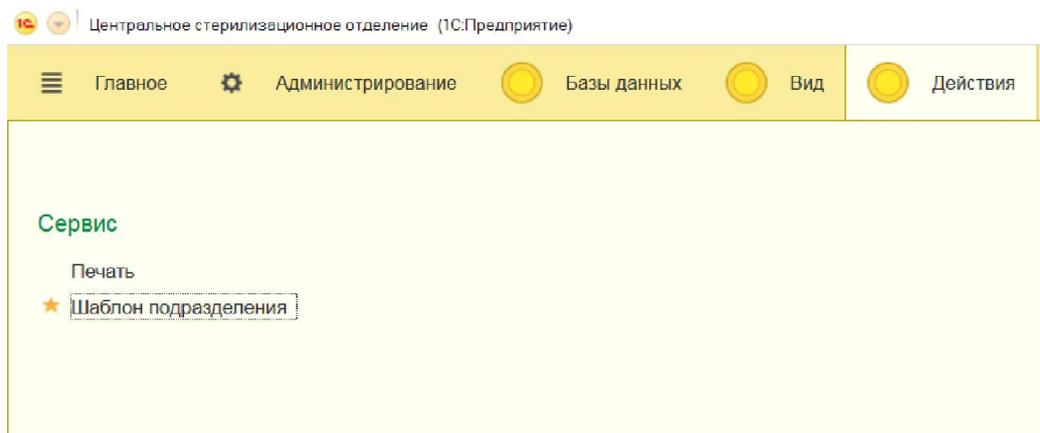

Выберите необходимое подразделение и нажмите клавишу «**Просмотр**». Для печати нажмите кнопку «**Печать**», расположенный в верхнем правом углу.

Центральное стерилизационное отделение (1С Предприятие)

Главное | Администрирование | Базы данных | Вид | Действия | Документы | Отчеты | Система

← → Таблица

Наименование ЛПУ: МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Центральное стерилизационное отделение					
Требование на стерилизацию					
Название подразделения Дневной стационар каб.422		Код отделения Дневной Стационар 422			
Дата		Кабинет:			
Ответственный от подразделения		Врач:			
Ответственный от ЦСО		Подпись			
		Подпись			
	Название	Отпр-но в ЦСО	Кол-во в упаковке	Получен в ЦСО	Комментарий
	Набор д/подкожных вливаний				
	Банка металлическая				

Отчеты

В системе доступны стандартные отчеты

1. **Контроль ПСО** – данный отчет может использоваться вместо журнала учета качества предстерилизационной обработки, форма № 366/у так как соответствует необходимой форме. Отчет необходимо печатать ежедневно в конце рабочего дня. Подписи ответственных проставляются вручную.

Для печати отчета нажмите Отчеты –Контроль ПСО. Выберите период и нажмите кнопку «Сформировать»

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу.

Дата	Способ обработки	Применяемое средство	Результат выборочного химического контроля обработанных изделий				Фамилия лица, проводившего контроль
			Наименование изделия	количество штук	из них загрязненных кровью	моющими средствами	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Банка стекло	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Всрочка ушная металлическая	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Всрочка ушная пластиковая	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Зажим окончатый	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Зеркало горланное	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Зеркало носовое	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Зонд атиковый	1	-	-	
01.12.2017 9:45:04	Моющая машина №1	Азопирамовая проба	Зонд пуговчатый	1	-	-	

2. **Статистика по изделиям** – данный отчет отображает количество обработанных и выданных изделий в ЦСО за выбранный период в различных разрезах:

- Статистика по изделиям (общая)
- Статистика по изделиям (Отделения)
- Статистика изделий по отделениям (общая)

Для печати отчета нажмите Отчеты – Статистика по изделиям. Выберите вид отчета , тип сортировки, период и нажмите кнопку «Сформировать»

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу.

Центральное стерилизационное отделение (ТС.Предприятие)

Главное | Администрирование | Базы данных | Вид | Действия | Документы | Отчеты | Система

← → ☆ **Статистика по изделиям**

Вид отчета:

Сортировка:

Период отчета:

← → Таблица

Наименование ЛПУ:	МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова	
Отделение:	Центральное стерилизационное отделение	
Период:	01.12.2017 - 01.12.2017	
Ответственный:	Администратор	
Дата создания:	25.12.2017	
Подпись:	_____	
Статистика изделий по отделениям (общая)		
Наименование отделения		Обработано и Выдано (шт.)
Анестезиология Реанимация		35
Кардиология		7
МНОЦ Поликлиника каб.245 (ЛОР)		169
Операционный блок 4-Захарова		131
Поликлиника каб.406 (Стоматология терапевт)		92
Поликлиника каб.417 (Стоматология ортопед)		38

3. **Статистика по упаковке** - данный отчет отображает количество используемого упаковочного материала за выбранный период в различных разрезах:

- Упаковка за период по отделениям
- Упаковка за период общая
- Упаковка за период по изделиям

Для печати отчета нажмите Отчеты – Статистика по упаковке. Выберите вид отчета , период и если необходимо уточнение тип укладки, упаковка, подразделение. Нажмите кнопку «Сформировать»

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу.

Главное Администрирование Базы данных Вид

← → ☆ **Статистика по упаковке**

Вид отчета: Упаковка за период общая
 Период: 01.12.2017 - 01.12.2017
 Тип укладки: ... ✕
 Упаковка: ... ✕
 Подразделение: ... ✕

Центральное стерилизационное отделение (ЦСО Предприятие)

Главное Администрирование Базы данных Вид Действия Документы Отчеты Система

← → Таблица

Наименование ЛПУ:	МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова	
Отделение:	Центральное стерилизационное отделение	
Период:	01.12.2017 - 01.12.2017	
Тип упаковки:		
Автор:	Администратор	
Дата создания:	25.12.2017	
Подпись:		
Упаковка за период общая		
Размер упаковки	Наименование упаковки	Количество
100мм x 150мм	Комбинированные пакеты без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации (1600шт/кор)	8
100мм x 200 мм (р)	Комбинированные рулоны без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации	36
100мм x 300мм	Комбинированные пакеты без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации (2000шт/кор)	4
	комбинированный пакет без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации	

Документы

В данном разделе возможно ознакомиться с ранее созданными документами по каждому этапу отдельно.

Заявки подразделений - в данном разделе содержатся ранее созданные заявки от подразделений в электронном виде.

Требования-накладные - в данном разделе содержатся принятые заявки от подразделений в ЦСО

Загрузка моечных машин - в данном разделе содержатся все ранее сформированные партии моечных машин

Регистрация контрольный проб- в данном разделе содержатся сведения о ранее зарегистрированных контрольных пробах

Одобрение мойки – В данном разделе содержатся документы одобрения партий моечных машин

Упаковка – в данном разделе содержатся документы подтверждающие упаковку изделий согласно заказам от подразделений

Стерилизация – данный раздел содержит сведения о ранее созданных партиях стерилизации

Одобрение стерилизации – данный раздел содежит сведения о корректности завершившихся циклов стерилизации

Выдача – данный раздел содержит сведения о выданных заказах подразделений.

Сведения о продуктах

В системе логируются все действия, поэтому посмотреть историю обработки какого либо изделия не составляет труда.

Каждый раз, когда изделия поступает в ЦСО на обработку оно получает свой уникальный номер продукта, с которым проходит от этапа приема до этапа выдачи.

Для того чтобы посмотреть историю того или иного продукта перейдите на вкладку Система - Продукты

С помощью поиска по полю Код найдите номер необходимого продукта. Кликните два раза по строке, чтобы открыть карточку продукта. В карточке есть две закладки:

Основное - отображает общие сведения о продукте, такие как Наименование, количество, документ по которому принимался продукт.

The screenshot shows a window titled 'Набор стоматологический терапия (8) (Продукт) (1С:Предприятие)'. The main content area is titled 'Набор стоматологический терапия (8) (Продукт)'. Below the title, there are two tabs: 'Основное' (selected) and 'Логирование действий'. There are three buttons: 'Записать и закрыть' (yellow), 'Записать', and 'Еще'. Under the 'Автозначения' section, there are four rows of data: 'Код: 000000146', 'Наименование: Набор стоматологический терапия (8)', 'Изделие: Набор стоматологический терапия', and 'Количество: 8'. The last row is 'Требование накладная: Требование-накладная 000000016 от 10.04.2017 10:04:17'.

Логирование действий - отображает все документы в системе, которые связаны с данным продуктом. Так же в быстром доступе находится информация согласно столбцам:

Период - когда был создан документ

Регистратор – тип операции, проводимый с продуктом

Продукт – наименование изделия

Код продукта – код изделия присвоенный на этапе приемки и следуемый с изделием до выдачи

Метка – метка к которой был привязан продукт на различных этапах цикла

Подразделение – подразделение, из которого поступило изделий

Статус – статус продукта, меняющийся от этапа к этапу

Ответственный – сотрудник ответственный за проведение этапа

Набор стоматологический терапия (8) (Продукт)

Основное Логирование действий

Логирование действий

Найти... Отменить поиск

Еще ▾

Период	Регистратор	Продукт	Код продукта	Метка
10.04.2017 10:04:17	Требование-накладная 000000016 от 10...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Мое
10.04.2017 10:31:32	Загрузка моечных машин 000000017 от 1...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Мое
10.04.2017 11:25:13	Регистрация контрольных проб 00000001...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Мое
10.04.2017 11:25:58	Одобрение мойки 000000009 от 10.04.20...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Мое
10.04.2017 11:27:57	Упаковка 000000011 от 10.04.2017 11:27...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Кор:
10.04.2017 11:41:59	Стерилизация 000000012 от 10.04.2017 ...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Кор:
10.04.2017 14:59:41	Одобрение стерилизации 000000012 от 1...	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Кор:
10.04.2017 16:19:16	Выдача 000000012 от 10.04.2017 16:19:16	Набор стоматологический терапия (8)	000000146	Кор: